



# Guide d'utilisation des lunettes pour les aveugles I SEE



VERSION 0

# Commençons par une petite introduction !

Ce guide a été réalisé pour vous accompagner pas-à-pas dans votre expérience avec les lunettes intelligentes conçues par HiTeck.

HiTeck développe des lunettes intelligentes et connectées. Notre innovation technologique permet d'apporter de précieuses informations à chaque individu pour gérer au mieux sa santé, son bien-être et sa sécurité.

## Le champ des possibles avec vos lunettes connecté

**Prévenir Les obstacles**

**Scanner vos documents**


**Appeler un ami (appel vidéo )**

**Et bien plus encore...**

Vos lunettes connectées sont une solution technologique qui se compose d'un matériel (vos lunettes) d'un logiciel embarqué dans les lunettes. Nous veillerons à mettre à jour ce logiciel régulièrement sans que cela ne requière aucune action de votre part


Vos lunettes connectées intelligentes embarquent une quinzaine de capteurs tels que des capteurs infrarouge (pour mesurer le clignement des yeux), des capteurs de température, de lumière, mais également une centrale inertielle avec accéléromètre, gyroscope, etc.

Ces capteurs nous permettront de vous proposer d'autres fonctionnalités au fil des mises à jour logicielles de vos lunettes.

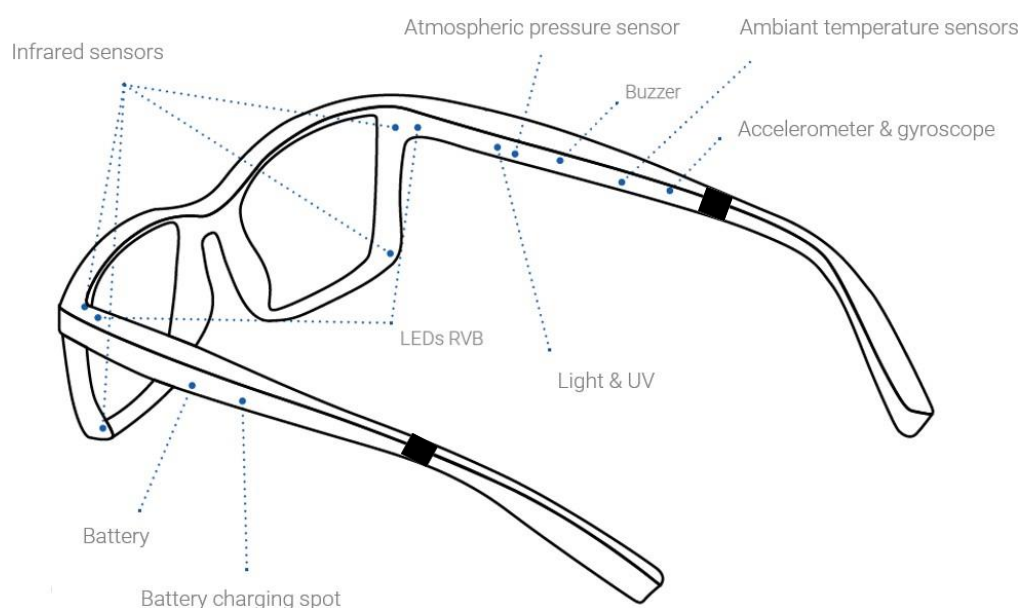

## REGLAGE DES BRANCHES



Pour une bonne utilisation des lunettes et afin de permettre au système de fonctionner correctement il est impératif d'ajuster les branches de vos lunettes. La monture doit être bien centrée sur votre visage. Les bagues, placées au bout des branches sont ajustables. Pliez-les afin de les adapter au mieux à vos oreilles.

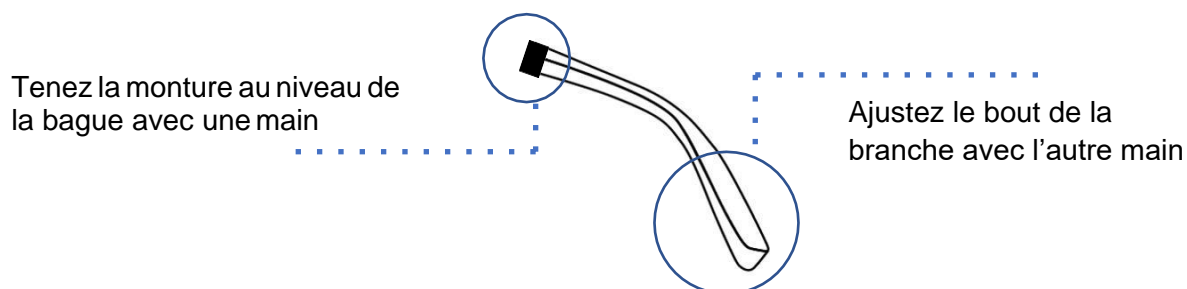

## LE CHARGEUR DE VOS MONTURES CONNECTÉES

Le chargeur de votre monture connectée se compose de :

Un aimant de chargement (également appelé « connecteur »). Une fois relié au secteur, le connecteur vient s'aimanter sur la branche gauche de la monture pour effectuer le chargement.

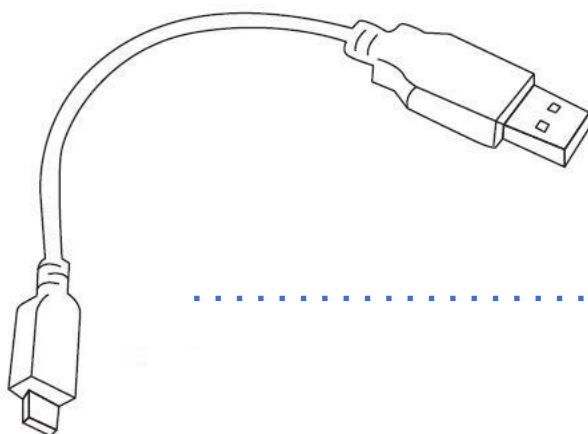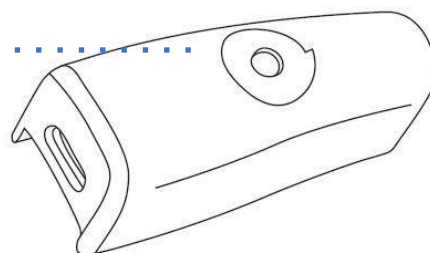


Un câble d'alimentation USB et micro- USB, qui relie l'aimant de chargement d'un côté et la prise secteur de l'autre.

...

Avant la première utilisation de vos lunettes connectées, assurez-vous d'avoir préalablement chargé vos lunettes pendant environ 4 heures jusqu'à ce que la LED gauche de vos lunettes clignote en vert.

Pour charger vos lunettes connectées à l'aide de votre kit de chargement, veuillez suivre les étapes suivantes :

- 1 Reliez votre aimant de chargement à un adaptateur secteur en utilisant le câble d'alimentation micro-USB, et branchez l'ensemble du dispositif de chargement sur le secteur.
- 2 Une fois le matériel de chargement mis en place et prêt à être utilisé, connectez la branche gauche à l'aimant de chargement. L'aimant de chargement et l'aimant intégré dans la monture s'attirent pour permettre la connexion entre les deux appareils.

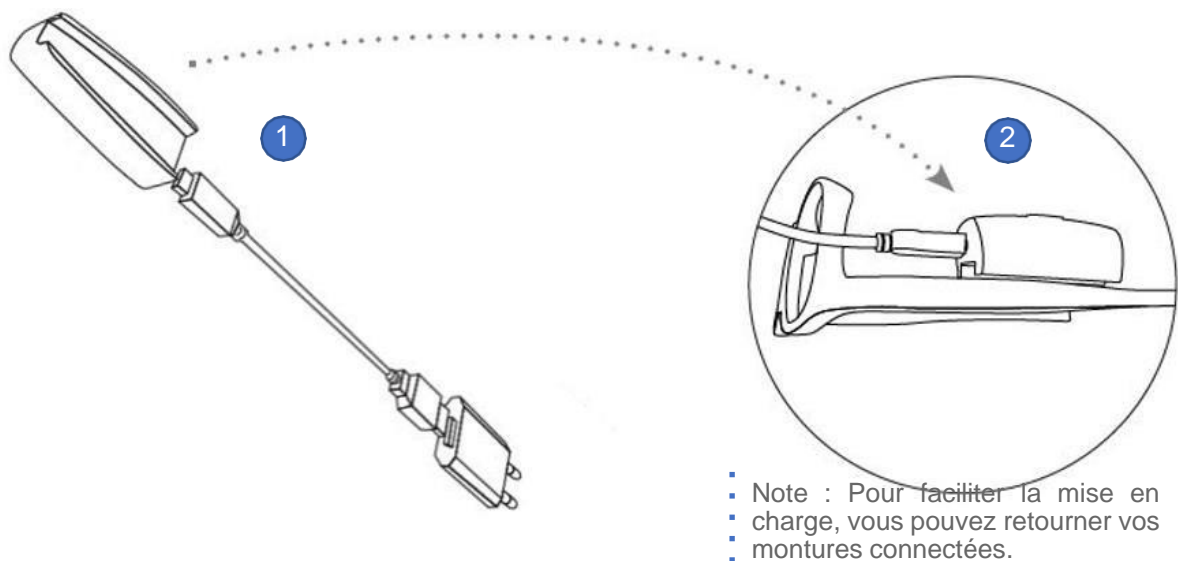

- 3 Il ne vous reste plus qu'à attendre le chargement complet de votre monture connectée. Quand les lunettes sont rechargées, une des LEDs clignote en vert.

Une fois le chargement de vos lunettes arrivé à terme, pensez à débrancher l'ensemble du kit de chargement.

## RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION DES LUNETTES CONNÉCTÉES

Une utilisation anormale de votre monture connectée (non-respect des recommandations d'emploi comme, par exemple, celles présentées ci-dessus) rendra caduque la garantie HiTeck en cas de dysfonctionnement, de panne ou de casse.



Ne pas faire chauffer les lunettes ou les mettre à proximité d'une source



Ne pas immerger les lunettes.



Ne pas marcher sur les lunettes.



Ne pas faire porter les lunettes à des animaux.



Ne pas mettre les lunettes dans le micro-onde.

